


产品结构

PRODUCT STRUCTURE

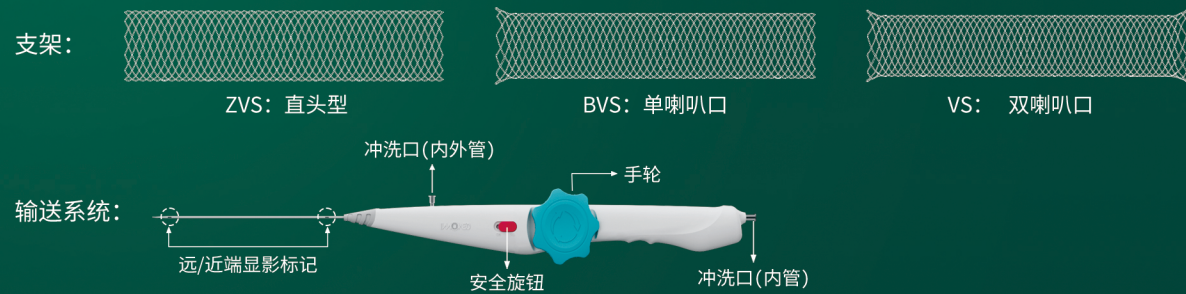

产品参数

PRODUCT PARAMETERS

支架直径	支架长度	兼容导丝系统	适配鞘	输送系统有效长度
10mm-20mm	60mm-120mm	0.035"	10F	83cm

型号规格	支架长度/mm				
	60	80	100	120	
ZVS系列	10	ZVS-10-060	ZVS-10-080	ZVS-10-100	ZVS-10-120
	11	ZVS-11-060	ZVS-11-080	ZVS-11-100	ZVS-11-120
	12	ZVS-12-060	ZVS-12-080	ZVS-12-100	ZVS-12-120
	13	ZVS-13-060	ZVS-13-080	ZVS-13-100	ZVS-13-120
	14	ZVS-14-060	ZVS-14-080	ZVS-14-100	ZVS-14-120
	16	ZVS-16-060	ZVS-16-080	ZVS-16-100	ZVS-16-120
	18	ZVS-18-060	ZVS-18-080	ZVS-18-100	N/A
	20	ZVS-20-060	ZVS-20-080	ZVS-20-100	N/A
BVS系列	10	BVS-10-060	BVS-10-080	BVS-10-100	BVS-10-120
	12	BVS-12-060	BVS-12-080	BVS-12-100	BVS-12-120
	13	BVS-13-060	BVS-13-080	BVS-13-100	BVS-13-120
	14	BVS-14-060	BVS-14-080	BVS-14-100	BVS-14-120
	16	BVS-16-060	BVS-16-080	BVS-16-100	BVS-16-120
	18	BVS-18-060	BVS-18-080	BVS-18-100	N/A
	20	BVS-20-060	BVS-20-080	BVS-20-100	N/A
	VS系列	10	VS-10-060	VS-10-080	VS-10-100
12		VS-12-060	VS-12-080	VS-12-100	VS-12-120
14		VS-14-060	VS-14-080	VS-14-100	VS-14-120
16		VS-16-060	VS-16-080	VS-16-100	VS-16-120


· 本产品预期在髂股静脉内使用，用于治疗非血栓性髂静脉压迫综合征和深静脉血栓形成后综合征。



中天医疗 · INNO-XMART 静脉支架系统

首款获NMPA批准的镍钛合金编织型静脉支架

国械注准 20233131034

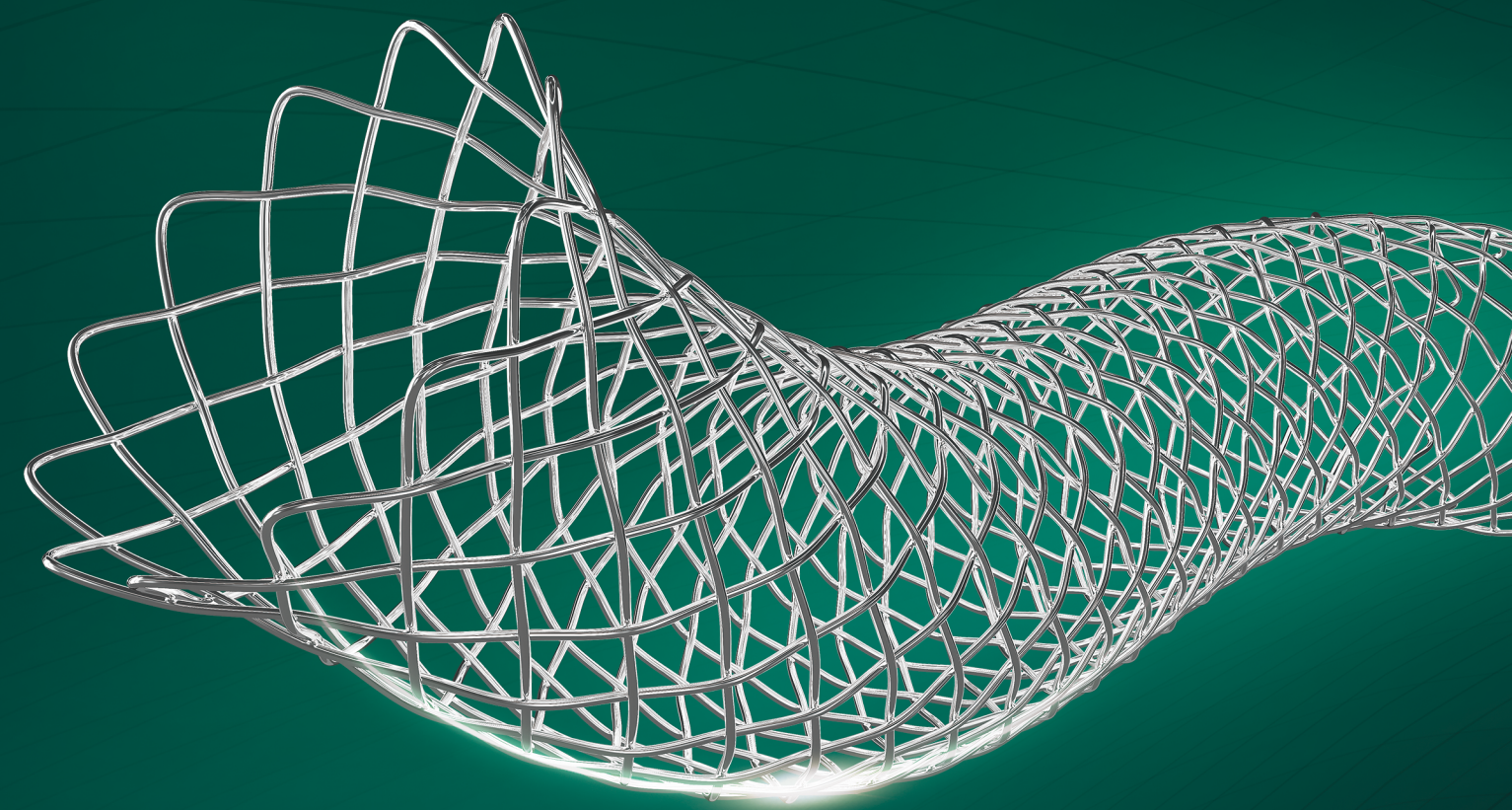

创新科技 让血管治疗更简单



苏州中天医疗器械科技有限公司

地址：苏州工业园区车坊东堰里路21号生物医药产业园5期6号楼


电话：86-0512-69138730

邮箱：Information@zenithmedtech.com

网址：Zenithmedtech.com


01 有效支撑 平衡柔顺

- 12根镍钛铂金丝闭环无缝编织结构，提供更强的径向支撑力和单向抗压力，同时顺应髂静脉血管解剖走形，实现真正“软硬”两全。

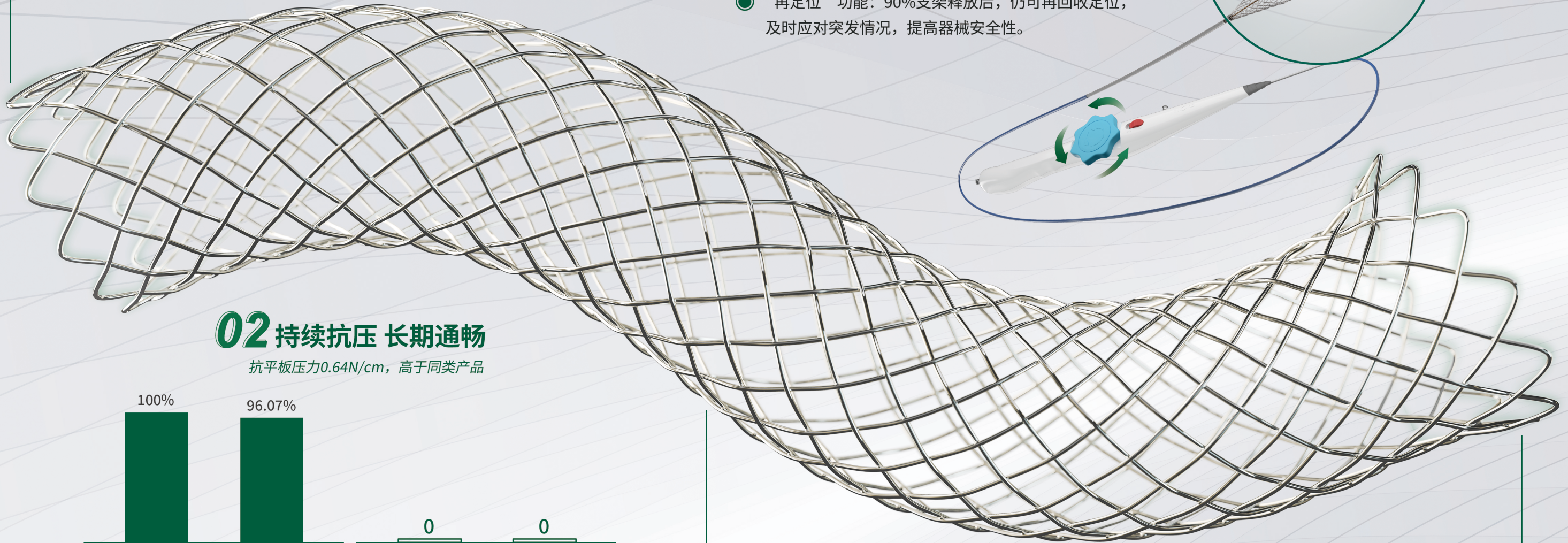


04 操作简便 精准安全

- 支架输送系统独特的“自补偿”机制，只需旋转手轮即可实现支架原位释放，极大降低短缩风险。
- “再定位”功能：90%支架释放后，仍可再回收定位，及时应对突发情况，提高器械安全性。

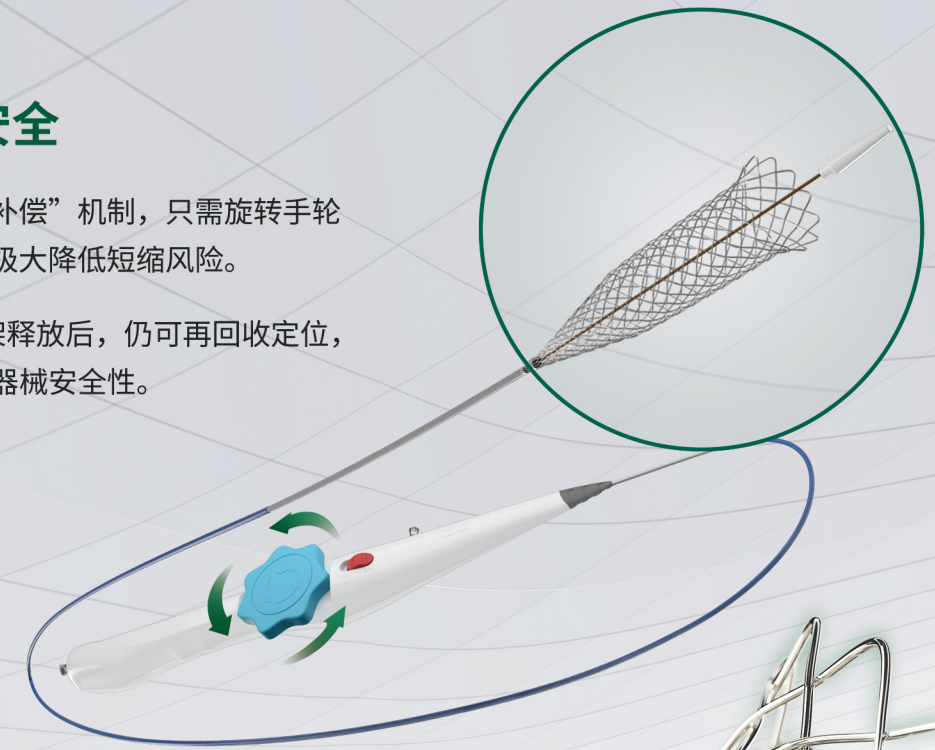

02 持续抗压 长期通畅

抗平板压力0.64N/cm，高于同类产品

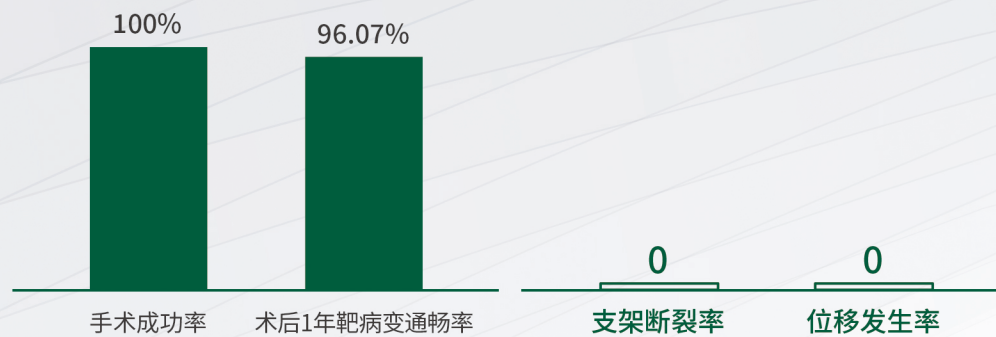

*数据来源: INNO-XMART 12个月临床研究结果 (PPS分析集下评估)

03 精准锚定 防止位移

- DFT编织丝使支架具有良好显影性，降低前方肠道气体显影干扰，为手术保驾护航。
- 头端独特的“短喇叭口”设计，更贴合髂静脉开口位置，保证有效锚定和精准释放，避免影响对侧血流。

05 更多选择 适用广泛

- ZVS(直头型)、BVS(单喇叭口)、VS(双喇叭口)三种不同支架形态，满足更多临床需求。