

**产品结构**  
PRODUCT STRUCTURE

**外周血栓抽吸导管**

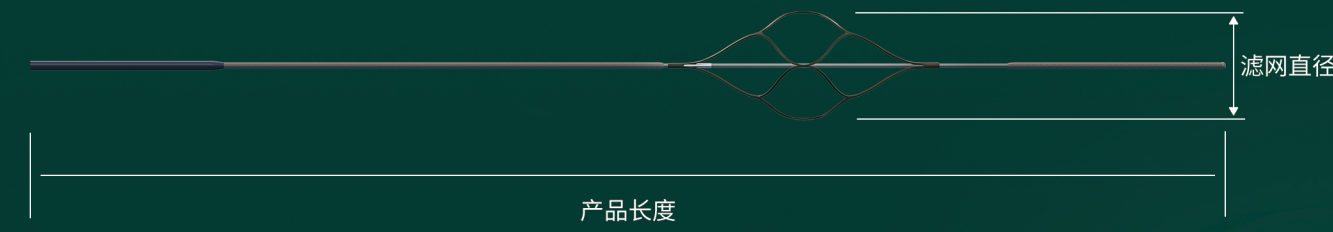
**产品参数**  
PRODUCT PARAMETERS

导管尺寸	规格型号		远端/近端内径	远端/近端外径	最大适配导丝	工作长度
	代号	长度				
4F	520004	050/070/090/105/120/135/145	0.041"/1.0mm	0.051"/1.3mm	≤0.038"	50/70/90/105/120/135/145cm
		050MP/070MP/090MP/105MP/120MP/135MP/145MP				
5F	520005	050/070/090/105/120/135/145	0.058"/1.4mm	0.070"/1.7mm	≤0.038"	50/70/90/105/120/135/145cm
		050MP/070MP/090MP/105MP/120MP/135MP/145MP				
6F	520006	050/070/090/105/120/135/145	0.072"/1.8mm	0.083"/2.1mm	≤0.038"	50/70/90/105/120/135/145cm
		050MP/070MP/090MP/105MP/120MP/135MP/145MP				
7F	520007	050/070/090/105/120/135/145	0.082"/2.0mm	0.091"/2.3mm	≤0.038"	50/70/90/105/120/135/145cm
		050MP/070MP/090MP/105MP/120MP/135MP/145MP				
8F	520008	050/070/090/105/120/135/145	0.090"/2.3mm	0.102"/2.6mm	≤0.038"	50/70/90/105/120/135/145cm
		050MP/070MP/090MP/105MP/120MP/135MP/145MP				
9F	520009	050/070/090/105/120/135/145	0.100"/2.5mm	0.119"/3.0mm	≤0.038"	50/70/90/105/120/135/145cm
		050MP/070MP/090MP/105MP/120MP/135MP/145MP				
10F	520010	050/070/090/105/120/135/145	0.112"/2.84mm	0.130"/3.3mm	≤0.038"	50/70/90/105/120/135/145cm
		050MP/070MP/090MP/105MP/120MP/135MP/145MP				
12F	520012	050/070/090/105/120/135/145	0.139"/3.5mm	0.157"/4.0mm	≤0.038"	50/70/90/105/120/135/145cm
		050MP/070MP/090MP/105MP/120MP/135MP/145MP				

· 该产品适用于去除外周血管系统中的血栓。

注：本产品的规格型号的查询方式为：代号列+长度，例如520004050，即为4F，50cm导管。

**产品结构**  
PRODUCT STRUCTURE

**外周血栓分离器**

**产品参数**  
PRODUCT PARAMETERS

型号/规格	导丝直径(±0.05mm)	远端外径(±0.05mm)	滤网直径(±0.3mm)	产品长度(±5cm)
521142120	0.36mm	0.35mm	2.0mm	120cm
521142150	0.36mm	0.35mm	2.0mm	150cm
521142210	0.36mm	0.35mm	2.0mm	210cm
521163120	0.41mm	0.35mm	3.0mm	120cm
521163150	0.41mm	0.35mm	3.0mm	150cm
521163210	0.41mm	0.35mm	3.0mm	210cm
521164120	0.41mm	0.35mm	4.0mm	120cm
521164150	0.41mm	0.35mm	4.0mm	150cm
521164210	0.41mm	0.35mm	4.0mm	210cm
521185120	0.46mm	0.35mm	5.0mm	120cm
521185150	0.46mm	0.35mm	5.0mm	150cm
521185210	0.46mm	0.35mm	5.0mm	210cm
521216120	0.53mm	0.35mm	6.0mm	120cm
521216150	0.53mm	0.35mm	6.0mm	150cm
521216210	0.53mm	0.35mm	6.0mm	210cm
521217120	0.53mm	0.35mm	7.0mm	120cm
521217150	0.53mm	0.35mm	7.0mm	150cm
521217210	0.53mm	0.35mm	7.0mm	210cm

· 该产品在血管介入手术过程中配合血栓抽吸导管使用，用于移除导管内堵塞的栓塞物质。


**苏州中天医疗器械科技有限公司**

地址：苏州工业园区车坊东堰里路21号生物医药产业园5期  
电话：86-0512-69138730  
邮箱：Information@zenithmedtech.com  
网址：Zenithmedtech.com

**中天天航® Pro 外周血栓抽吸导管**
**中天天戟® 外周血栓分离器[外周抽吸导管用栓塞移除装置]**

Zenith Peripheral Aspiration Catheter & Zenith Peripheral Separator

导管：国械注准20233031276 分离器：国械注准20233031688



创新科技 让血管治疗更简单

# 中天外周血栓抽吸创新解决方案

「天航」吸栓，「天戟」碎栓，天工开物，逢堵必通

## 天戟外周血栓分离器

远端闭合镍钛自膨锥体设计，通过适配抽吸导管在主要闭塞处的近端边缘上推送和回收，能纵向切割血栓，分离附壁血栓，可轻松碎栓，减少堵管，联合吸栓导管使用，提升抽吸效率。

- 可在抽吸导管堵管后，快速碎栓疏通导管，减少或避免撤出抽吸导管，缩短手术时间；
- 如果判断是陈旧性血栓或附壁血栓，可通过分离器捕获血栓或手动碎栓，提升系统整体抽吸效率。

## 02 安全耐用，更易输送

- 柔软无创头端，血管内膜及瓣膜损伤风险极低，且抗负压抗吸瘪。
- 双层编织缠簧结构提供极佳的远端柔软到位性、近端支撑性和抗折抗扭结性。



- 9段渐变式强度设计，超滑专利涂层，推送传递更顺畅。

## 01 腔大壁薄，更强抽吸

- 最大内腔0.139 inch，更大血栓接触面积，更强抽吸力。

## 03 更多选择，更广覆盖

- 抽吸导管型号4F-12F，50cm-145cm长度可选，支持深静脉血栓、下肢缺血、肺栓塞等不同部位血栓清除需求。
- 直型或45°预塑形头端，360度环向抽吸。



- 「天航」血栓抽吸导管+负压抽吸装置—吸栓；「天戟」血栓分离器—碎栓

- 独特碎栓设计+大腔抽吸导管持续负压抽吸，抽吸更高效。
- 新颖的导管结构设计，操作更灵活便捷。
- 多抽吸角度设计，附壁血栓无所遁形。
- 柔软无创导管结构，保护血管和瓣膜无微不至。

- 不同性质的血栓、不同应用场景均能灵活应对

- 新鲜血栓&游离陈旧血栓：天航导管随心抽，简单便捷应用广。
- 陈旧血栓&附壁血栓：吸栓碎栓联合取栓，提升系统整体抽吸效率。

## 中天血栓负压抽吸装置



- 抽吸泵  
持续稳定的-95 kPa(-28inHg)真空负压输出，满足大负荷血栓清除需求
- 一次性收集罐  
滤网设计血栓收集可视化
- 一次性连接管  
2.4mm内径，高效抽吸防堵管